



a Guerbet Group Company

Angiomat® Illumena®

SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE



Uma injetora multimodalidade

Um simples toque

O sistema de injeção de contraste Angiomat® Illumena® foi desenvolvido para simplificar a rotina clínica.

Com o toque de um botão, o sistema digital de injeção Angiomat® Illumena® alterna entre os modos cardio, angio e TC.

A extraordinária versatilidade desse sistema amplia a sua habilidade, fornecendo cuidado avançado ao paciente em uma vasta série de procedimentos.

Eficiência e segurança

Flexibilidade e controle

- ⊕ Execute procedimentos com injeção única ou múltipla.
- ⊕ Selecione e alterne os modos de operação com um único botão.
- ⊕ Armazene até 45 protocolos definidos pelo usuário em cada modo.

Visor digital na cabeça da injetora

- ⊕ O display LED gira automaticamente para garantir orientação correta de visualização, à medida que a cabeça muda de posição.
- ⊕ Mostra o protocolo programado e quanto resta de volume de meio de contraste.

Barra de controle de enchimento

- ⊕ Controla o êmbolo para o enchimento e o esvaziamento da seringa.
- ⊕ Operação com um único dedo.

Conveniência

Inclinação e rotação do painel

- ⊕ Fácil ajuste do ângulo de inclinação.
- ⊕ Gira 140 graus, proporcionando diversas opções de visualização.

Fácil operação

- ⊕ Controles manual e pedal permitem conforto e conveniência na operação da injetora durante o procedimento.
- ⊕ Controle manual permite protocolos de injeção única ou múltipla.
- ⊕ Possibilidade de uso com seringas preenchidas.

Recursos opcionais

Sistema de detecção e alerta de ar (ADAWS)

- ⊕ identifica seringa vazia.
- ⊕ reduz o risco de injeção de ar nos pacientes.



a Guerbet Group Company



a Guerbet Group Company

Angiomat® Illumena®

SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE

Especificações técnicas


Taxa de fluxo	Modos angiocardíaco e angioperiférico: 0,1 a 40,0 mL/s Modo TC: 0,1 a 10,0 mL/s
Limite de pressão	Modos angiocardíaco e angioperiférico: 75 a 1200 psi Modo TC: 75 a 300 psi
Tamanhos de seringas	Seringa vazia de 150 mL Seringas preenchidas de 50, 75, 100 e 125 mL*
Mantenedor de temperatura da seringa (opcional)	37°C nominal, minimiza a perda de calor do contraste pré-aquecido
Atraso da injeção	0 a 300 segundos
Atraso do scan (Modo TC)	0 a 300 segundos
Atraso entre fases	0 a 300 segundos
Número de fases	1, 2 ou 3-4
Memória de protocolos	Modo angio: 45 protocolos Modo TC: 45 protocolos

* Quando disponível

Voltagem: Bivolt

Registro ANVISA:10139810072

Múltiplas configurações

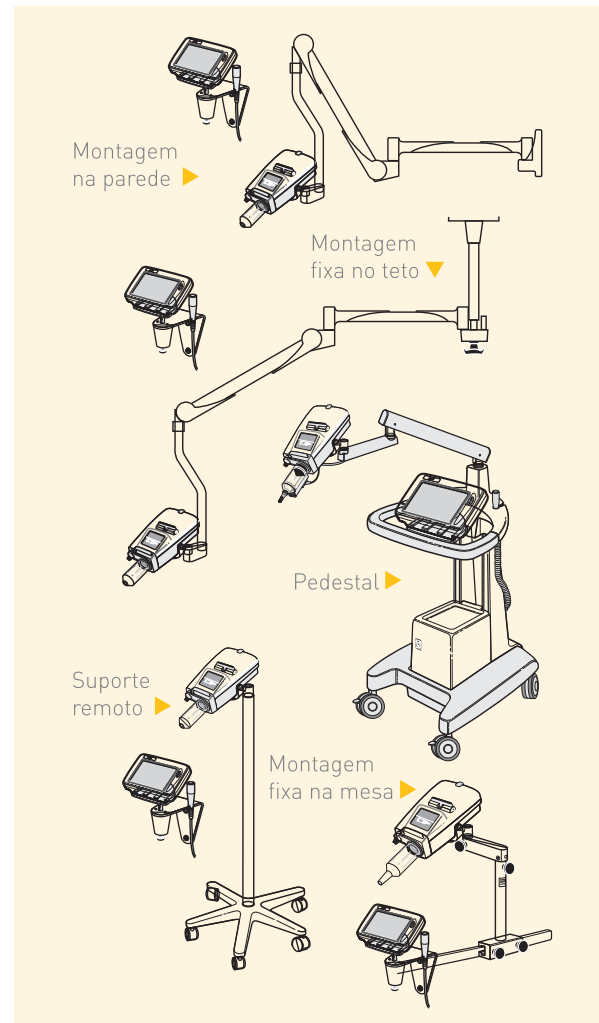

Para vendas, serviços e suporte, entre em contato com seu representante ou distribuidor. Você também pode entrar em contato conosco através do **0800.17.80.17** ou visite www.guerbet.com.br



a Guerbet Group Company